



BUBL® Relax & Sleep Gehoordeschermering

Productinformatie:

- Type: Oordopjes van was
- Maat: One Size
- Hoeveelheid: 10 paar
- SNR⁵: 25 dB
- Frequentie-specifieke demping:
 - H⁶: 26 dB
 - M⁷: 22 dB
 - L⁸: 20 dB

Beschrijving:

De BUBL® oordoppen van was beschermen tegen omgevingsgeluid zonder u helemaal af te schermen. De was neemt de lichaamstemperatuur aan waardoor de oordoppen zorgen voor een comfortabele bescherming tegen lawaai.

Gebruiksaanwijsties:

1. Voorbereiding:

- Zorg dat uw handen schoon zijn.
- Verwijder de watten rondom het wassen oordopje
- Verzacht het wassen oordopje al knedend met de vingers.
- Kneed het oordopje in de vorm van de gehoorgang.

2. Plaatsing:

1. Breng het hele wassen oordopje in het oor (max 1.5 cm).
2. Trek de oorschelp licht naar achteren om de lucht uit de gehoorgang te verwijderen.
3. Als het dopje niet goed afsluit, haal het eruit en probeer opnieuw.

Zie illustraties.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vóór gebruik.
- Draag steeds oordopjes in een omgeving met veel lawaai.
- Deze oordopjes zijn voor éénmalig gebruik.
- Het niet naleven van de aanbevelingen kan leiden tot aanzienlijke vermindering van de doeltreffendheid waardoor schade aan de gehoorgang mogelijk is.
- Het plots of snel verwijderen van de oordopjes uit de gehoorgang kan ernstige schade berokkenen aan het trommelvlies.
- Breng de oordopjes aan volgens de meegeleverde instructies.
- Bewaar de oordopjes in de oorspronkelijke verpakking.
- Bewaar ze op een schone en droge plaats onder de 30°C.

- Bewaar de oordopjes buiten het bereik van kinderen.
- Bepaalde chemische stoffen kunnen het product beschadigen.
- Let erop dat de was steeds compact blijft.
- Raadpleeg de verdelers bij vragen of surf naar www.bublearplugs.be



Uiterste gebruiksdatum – Het product niet gebruiken na de datum vermeld op de verpakking.

Normen en certificering

- Norm: EN352-2:2020
- Verordening: 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. PBM van categorie III
- Conformiteitsverklaring: Beschikbaar op www.bublearplugs.be
- Het EU-typeonderzoek (Module B) werd uitgevoerd door: Alienor Certification (Notified body 2754) Rue Albert Einstein, 86100 Châtelleraut, Frankrijk
- De conformiteit met het type wordt verzekerd volgens module D, onder toezicht van aangemelde instantie nr. 2754
- 2754

Productie en distributie

- Productent: Bengbu Hansheng Nursing Products Co. Ltd, Qinren Middle section of Qinji Village, Qinji Community, Bengbu City, 233000 Anhui, China
- Importeur: Axone Pharma SA: Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium

BUBL® Relax & Sleep Protection auditive

Informations sur le produit :

- Type : Bouchons d'oreilles en cire
- Taille : Taille Unique
- Quantité : 10 paires
- SNR⁵ : 25 dB
- Atténuation par fréquence :
 - H⁶: 26 dB
 - M⁷: 22 dB
 - L⁸: 20 dB

Description :

Les bouchons d'oreilles en cire de BUBL® protègent du bruit ambiant sans vous isoler complètement. La cire se réchauffe à la température du corps, offrant une protection acoustique confortable.

Instructions d'utilisation :

1. Préparation :

- Lavez-vous les mains.
- Retirez le coton entourant le bouchon d'oreille en cire.
- Assouplissez le bouchon en cire en le malaxant avec les doigts.
- Modelez le bouchon selon la forme du conduit auditif.

2. Mise en place :

1. Insérez entièrement le bouchon en cire dans l'oreille (max. 1,5 cm).
2. Tirez légèrement le pavillon de l'oreille vers l'arrière afin d'évacuer l'air du conduit auditif
3. Si l'insertion du bouchon n'est pas optimale, retirez-le et recommencez..

Voir illustrations.

Informations de sécurité importantes :

- Lire attentivement la notice avant utilisation
- Portez toujours des bouchons d'oreilles dans un environnement bruyant.
- Ces bouchons sont à usage unique.
- Le non-respect des recommandations peut entraîner une diminution importante de l'efficacité et provoquer des dommages au conduit auditif.
- Le retrait brusque ou rapide des bouchons peut causer de graves lésions au tympan.
- Insérez les bouchons conformément aux instructions fournies.
- Conservez-les dans leur emballage d'origine, dans un endroit propre et sec, à une température inférieure à 30 °C.
- Gardez-les hors de portée des enfants.
- Certaines substances chimiques peuvent endommager le produit.
- Veillez à ce que la cire reste toujours compacte.
- Pour toute question, contactez le distributeur ou consultez : www.bublearplugs.be



Date limite d'utilisation - Ne pas utiliser le produit après la date indiquée sur l'emballage.

Normes et certification

- Norme : EN 352-2:2020
- Règlement : 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. EPI de catégorie III
- Déclaration de conformité : Disponible sur www.bublearplugs.be
- L'examen EU de type (Module B) a été réalisé par : Alienor Certification (organisme notifié 2754) Rue Albert Einstein, 86100 Châtelleraut, France
- La conformité au type est assurée selon le module D, sous la surveillance de l'organisme notifié n°2754
- 2754

Fabrication et distribution

- Fabricant : Bengbu Hansheng Nursing Products Co. Ltd, Qinren Middle Section of Qinji Village, Qinji Community, Bengbu City, 233000 Anhui, Chine
- Importateur : Axone Pharma SA: Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium

BUBL® Relax & Sleep Gehörschutz

Produktinformationen:

- Typ: Wachsohrstöpsel
- Größe: Einheitsgröße
- Menge: 10 Paare
- SNR¹: 25 dB
- Frequenzspezifische Dämpfung:
 - H²: 26 dB
 - M²: 22 dB
 - L²: 20 dB

Beschreibung:

Die Wachs-Ohrstöpsel von BUBL® schützen vor Umgebungsgeräuschen, ohne Sie vollständig auszublenden. Das Wachs erwärmt sich auf Körpertemperatur und bietet so einen angenehmen Lärmschutz.

Gebrauchsanweisung:

1. Vorbereitung:

- Hände gründlich waschen.
- Entfernen Sie die Baumwollhülle um den Wachsohrstöpsel.
- Weichen Sie den Stöpsel durch Kneten zwischen den Fingern auf.
- Formen Sie den Stöpsel passend zum Gehörgang.

2. Einsetzen:

1. Führen Sie den Wachsohrstöpsel vollständig in das Ohr ein (max. 1,5 cm).
2. Ziehen Sie die Ohrmuschel leicht nach hinten, um Luft aus dem Gehörgang zu entfernen.
3. Falls keine dichte Abdichtung entsteht, entfernen Sie den Stöpsel und wiederholen Sie den Vorgang.

Siehe Abbildungen

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Tragen Sie immer Ohrstöpsel in lauter Umgebung.
- Diese Stöpsel sind Einwegprodukte.
- Nichtbeachtung der Empfehlungen kann die Wirksamkeit erheblich verringern und den Gehörgang schädigen.
- Ein abruptes oder schnelles Entfernen kann das Trommelfell stark verletzen.
- Setzen Sie die Ohrstöpsel gemäß den beiliegenden Anweisungen ein.
- Bewahren Sie sie in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort bei einer Temperatur unter 30 °C auf.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bestimmte chemische Stoffe können das Produkt beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass das Wachs stets kompakt bleibt.

- Bei Fragen den Vertrieb kontaktieren oder besuchen Sie: www.bublearplugs.be
- ☞ Verfallsdatum – Das Produkt nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum nicht mehr verwenden.

Normen und Zertifizierung

- Norm: EN 352-2:2020
- Verordnung: (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, PSA der Kategorie III
- Konformitätserklärung: Verfügbar unter www.bublearplugs.be
- Die EU-Baumusterprüfung (Modul B) wurde durchgeführt von: Alienor Certification (Benannte Stelle 2754) Rue Albert Einstein, 86100 Châtelleraut, Frankreich
- Die Konformität mit dem Baumuster wird gemäß Modul D unter der Überwachung der notifizierten Stelle Nr. 2754 gewährleistet.
- **CE** 2754

Herstellung und Vertrieb

- Hersteller: Bengbu Hansheng Nursing Products Co. Ltd, Qinren Middle Section of Qinji Village, Qinji Community, Bengbu City, 233000 Anhui, China
- Importeur: Axone Pharma SA; Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium


Ontdek BUBL®
Découvrez BUBL®
Entdecken Sie BUBL®

Vraag raad aan uw apotheker.
Demandez conseil à votre pharmacien.
Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat.



- ✓ RELAX & SLEEP
- ✓ MUSIC
- ✓ SWIMMING
- ✓ FLY & TRAVEL

Illustraties plaatsing / Illustrations placement / Abbildungen Platzierung:

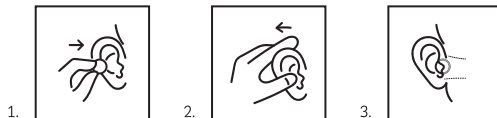

Frequency (Hz) ¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Average attenuation (dB) ²	28.4	23.2	19.6	24.5	22.4	27.5	34.9	36.8
Standard deviation (dB) ³	7	3.1	3.4	2.8	2.7	2	3.8	3.6
APV (dB) ⁴	21.4	20.1	16.2	21.7	19.7	25.5	31.1	33.2

	SNR	H	M	L
Average attenuation (dB) ²	26.7	28.2	23.6	21.8
Standard deviation (dB) ³	2	2.2	2.1	2.3
Value (dB) ⁹	25	26	22	20

¹Frequentie / Fréquence / Frequenz (Hz) – ²Gemiddelde demping / Atténuation moyenne / Mittlere Dämpfung (dB) – ³Standaardafwijking / Écart-type / Standardabweichung (dB) – ⁴Veronderstelde beschermingswaarde / Valeur de protection présumée / Angenommener Schutzwert – ⁵Algemene geluidsreductie index / Indice global de réduction du bruit / Gesamtschallminderungsgrad – ⁶Hoge frequentie / Haute fréquence / Hochfrequenz – ⁷Middenfrequentie / Fréquence moyenne / Mitteltonfrequenz – ⁸Lage frequentie / Basse fréquence / Tieftonfrequenz – ⁹Waarde / Valeur / Wert

Laatste versie bijsluiter / Dernière version de la notice / Letzte Version der Gebrauchsanweisung:
02/2026

AP-0607-V01